



INSTRUCTIONS FOR SALIVA COLLECTION

Using the SimplOFy® Saliva DNA Collection Device


NEW
iDEAS
Brain Imaging Study
for Memory Loss

alzheimer's
association

- 1 | Do not eat, drink, smoke, or use oral hygiene products for at least 10 minutes before you start the collection process.
- 2 | Rinse the mouth with water and discard. Please wait at least 5 minutes after this rinse to start the collection procedure.
- 3 | After the five minutes have passed, follow the illustrated instructions below. Video instructions are available on the website: <https://4saliva.com/products/simplofy/>


1

Open the package containing the SimplOFy® Saliva DNA Collection Device. Place contents on a clean and dry surface.

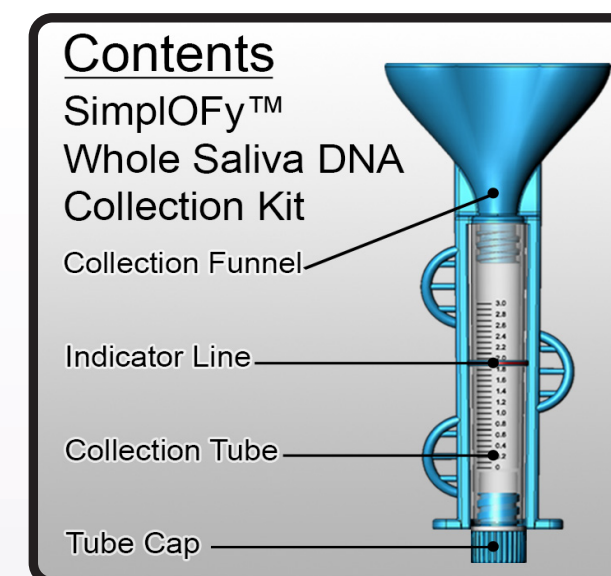


2

Place lips over the opening of the Collection Tube Funnel. Collect saliva until the sample level reaches the red Indicator Line.

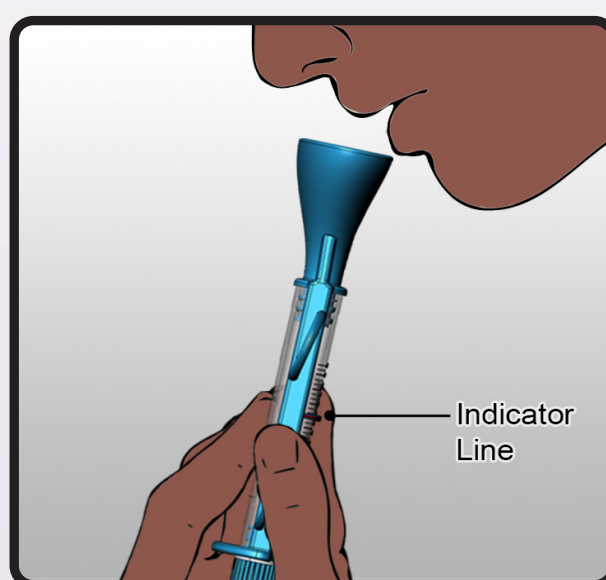


3

When collection has been completed, unscrew the Funnel from the Collection Tube by rotating the tube in the direction shown until the tube is completely detached from the Funnel.

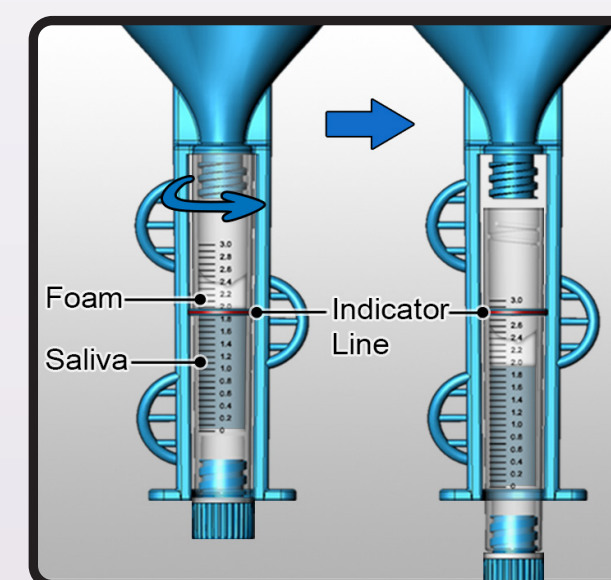


4

Remove the Cap from the bottom of the Collection Tube and screw it tightly closed.

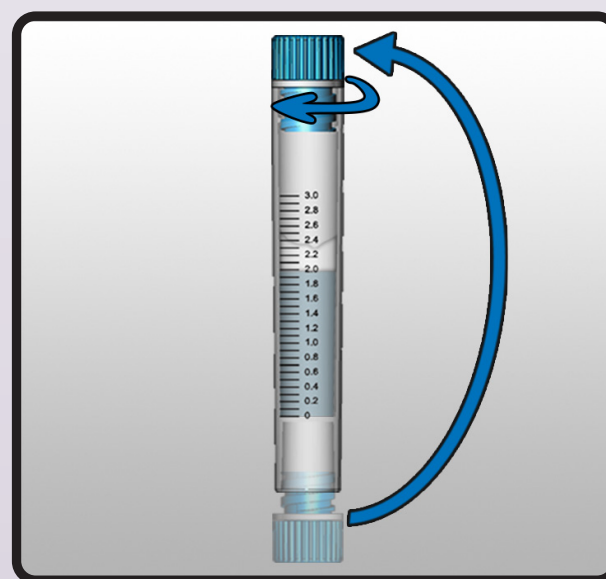

5


Vigorously invert the tube for 1 minute to mix the sample. The sample is now ready for shipment.

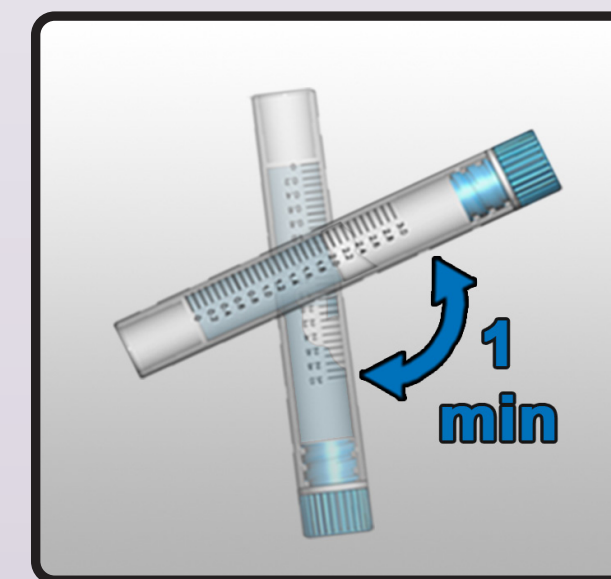


6

Saliva Shipment


Follow instructions to return samples to the Biomarker Lab.

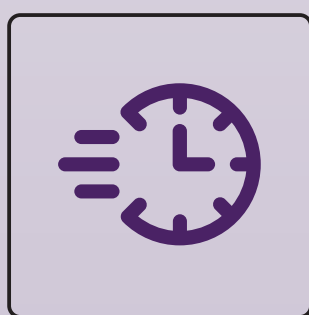


1 | Your sample is stable once it is mixed with the DNA stabilization buffer, but it is strongly recommended to ship the sample at your earliest convenience.

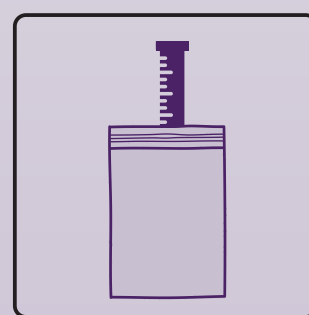


2 | Place the collection tube containing your sample in the plastic specimen bag.

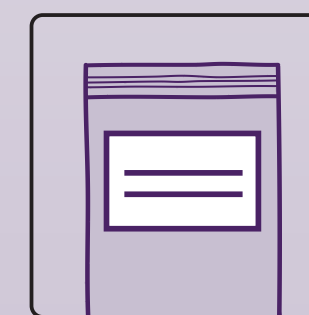

3 | Complete the 'Collection Date' and 'Collection Time' fields located on Sample Label stuck to the outside of the specimen bag.

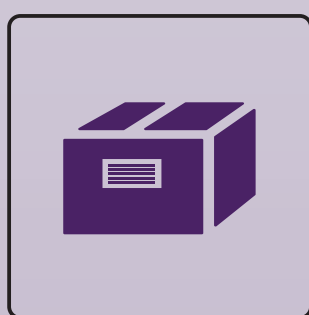

4 | Place the labeled specimen bag into the provided pre-paid shipping box and seal it

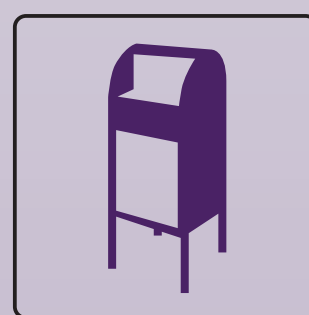

5 | Samples can be dropped off at your nearest local post mailbox.



6 | If you have any questions or concerns regarding collection or shipment of samples, please contact newideas-participant@alz.org or 800.272.3900.



INSTRUCCIONES PARA RECOGER LA MUESTRA DE SALIVA UTILIZANDO EL DISPOSITIVO ADN en Saliva SimplOFy®


NUEVAS IDEAS
Estudio de Imágenes Cerebrales para Determinar la Pérdida de Memoria

alzheimer's association

- 1 | No coma, beba, fume ni use productos de higiene bucal por lo menos 10 minutos antes de comenzar.
- 2 | Enjuáguese la boca con agua y espere 5 minutos antes de empezar a recolectar la muestra.
- 3 | Después de los 5 minutos, revise las siguientes instrucciones. Un video con instrucciones está disponible en: <https://4saliva.com/products/simplofy/>


1

Abra el paquete que contiene el dispositivo para recolectar el DNA de la Saliva SimplOFy y Colóquelo sobre una superficie limpia.

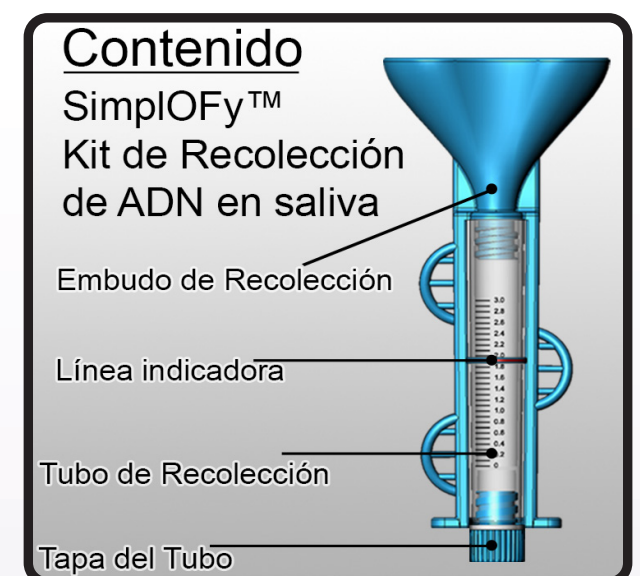


2

Ponga sus labios sobre el embudo del tubo, arroje la saliva hasta la línea indicadora roja.

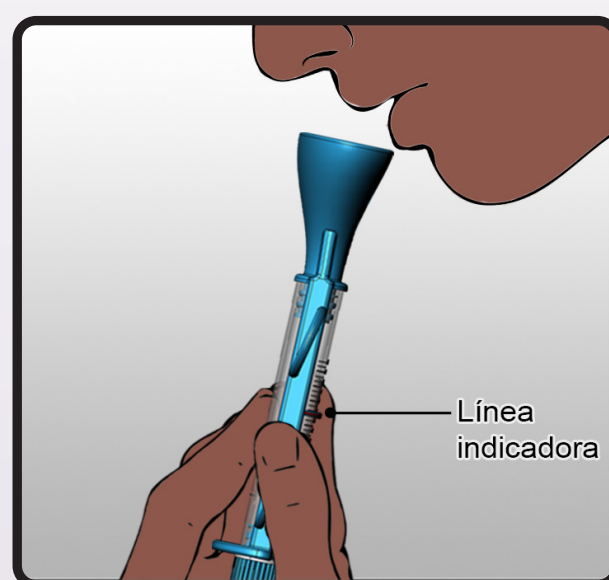


3

Cuando termine, desatornille el embudo del tubo de recolección rotándolo en la dirección indicada hasta que el tubo este completamente separado del embudo.

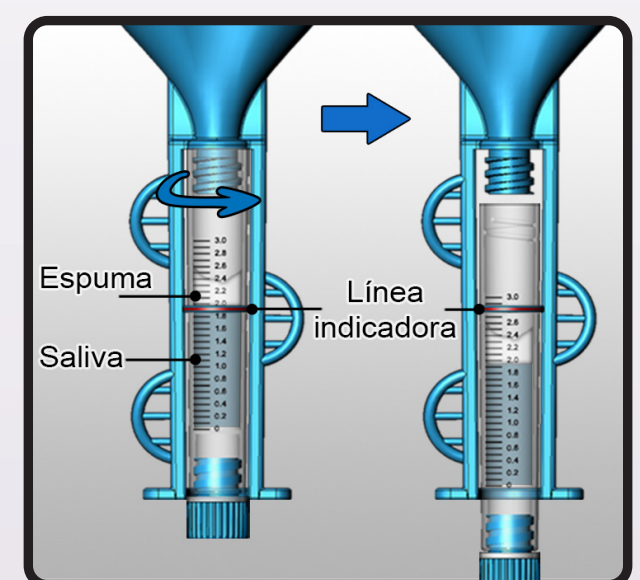


4

Retire con cuidado la tapa que está en la parte inferior del tubo y atorníllela para que quede bien cerrada.

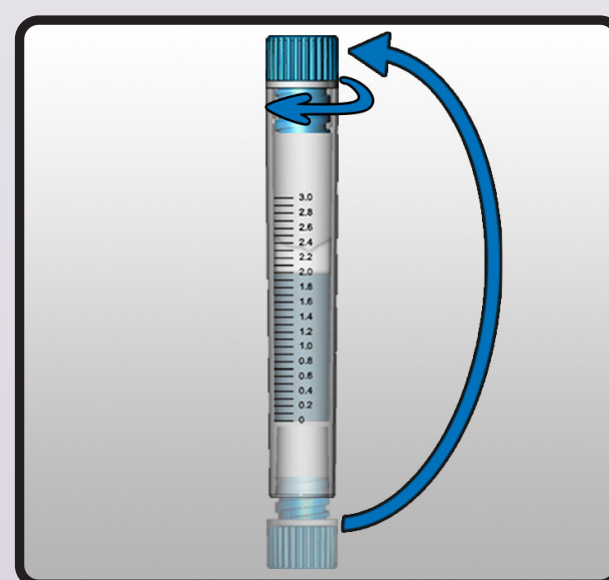


5

Invierta el tubo y agite la muestra por 1 minuto. Después de esto la muestra queda lista para ser enviada por correo.

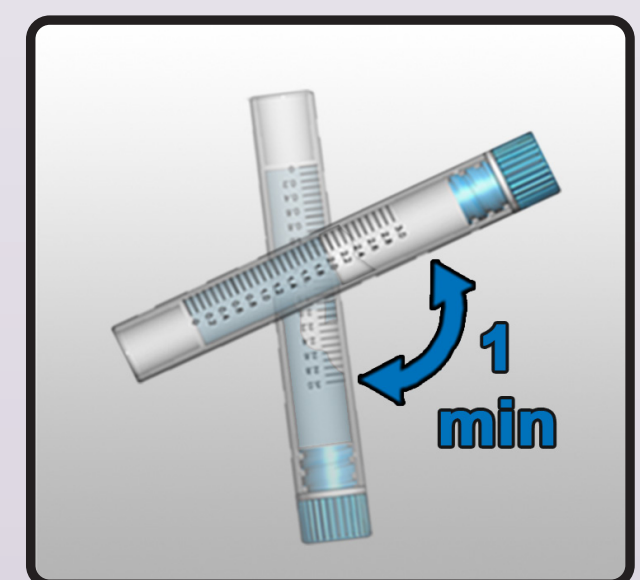


6


Envíe por correo de la muestra.
Instrucciones para enviar la muestra por correo a el Biomarker Lab.

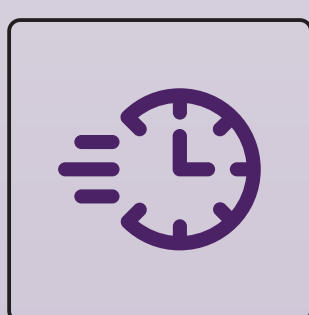


1 | La muestra se estabiliza después de ser mezclada con el estabilizador de DNA. Se recomienda enviar por correo la muestra lo más pronto posible.

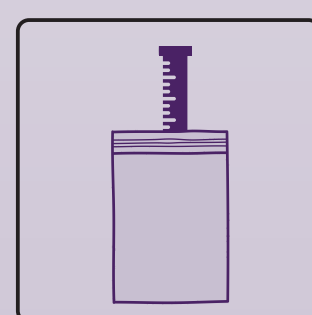


2 | Coloque el tubo con la muestra en la bolsa de plástico.

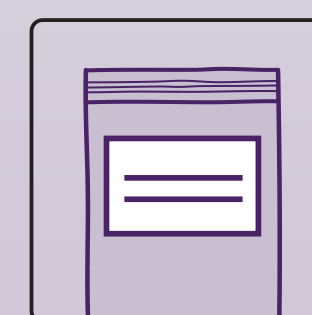

3 | Escriba en la etiqueta que esta en la bolsa de plástico la fecha y la hora en que se tomo la muestra.

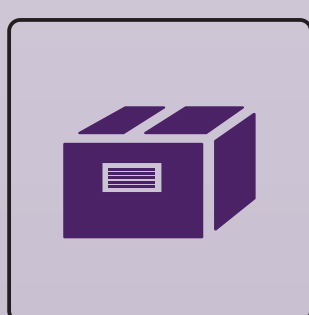

4 | Coloque la bolsa que contiene el tubo con la muestra, en la caja que contiene la etiqueta prepagada y ciérrela.

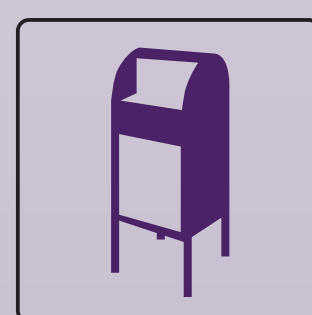

5 | Lleve la caja con la muestra a la oficina de correo más cercana.



6 | Si tiene preguntas sobre la colección o el envío de la muestra, por favor llame newideas-participant@alz.org or 800.272.3900.